

KLS martin
GROUP

**Ventajas
de un vistazo**

marSeal 5 plus

**iSellado vascular inteligente en una
nueva dimensión !**



maXium®

marSeal 5 plus

Ventajas para el cirujano

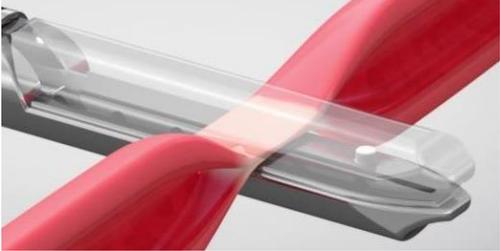
- **Nuevo** diseño del mango **perfeccionado y más ergonómico**
- **Activación manual**
- **Cambio de posición** de la **activación de la corriente y de la cuchilla** en el mango
→ **suprime la necesidad de cambiar la posición de la mano**
- **Geometría mejorada de las ramas para la preparación y el sellado**
 - Longitud de sellado: 20 mm
 - Longitud de corte: 19 mm
- **Preparación, sellado y sección** fiables con **un solo instrumento**
- Proceso de sellado **reproducible y rápido, tiempos de intervención más cortos**
- **Resultados de corte óptimos** gracias a la **cuchilla desechable estéril y la geometría cóncava de la cuchilla**
- Tiempos de intervención **más cortos**
- Vástago **rotable 360°**
- Expansión térmica lateral **mínima** gracias a la **punta de trabajo Recubierta**

Ventajas para el departamento central de suministros estériles y el personal de quirófano

- **Sistema modular**, el instrumento completo se puede desmontar fácilmente
- Función **Plug & Play**, el equipo de AF maxium® proporciona automáticamente la corriente de sellado correspondiente al conectar el instrumento
- **Montaje y desmontaje más fáciles** en los componentes individuales
- **Fácil limpieza y esterilización**
- **Esterilizable en autoclave a 134 °C**

Ventajas para la compra y la administración

- **Importante ahorro de costes** gracias a la **posibilidad de reutilización y la** proporción mínima de componentes desechables
- **Costes reducidos por aplicación en comparación con un instrumento exclusivamente de un solo uso**

Nuevo diseño del mango	
	
Gemoatría especial de las ramas	
	
Punta de trabajo recubierta	Forma cóncava de la cuchilla
